

VERMEIREN

Trigo T

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPIS TREŚCI

Przedmowa	2
1 Państwa produkt	2
1.1 Akcesoria	3
2 Przed użyciem	4
2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	4
2.2 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	4
2.3 Transport	5
2.4 Składanie - rozkładanie	5
2.5 (De)Montaż tylnych kół	6
2.6 Przechowywanie	6
3 Korzystanie z wózka inwalidzkiego	7
3.1 Hamulce postojowe	7
3.2 Dźwignie popychania (bezstopniowa regulacja)	7
3.3 Podłokietniki – Płyty boczne	8
3.4 Składane oparcie	8
3.5 Zabezpieczenie przed przewróceniem (opcjonalne)	8
3.6 Zdejmowanie/montaż podnóżków	8
3.7 Regulacja komfortu	9
3.8 Przechodzenie na / schodzenie z wózka inwalidzkiego	10
3.9 Jazda	10
4 Konserwacja	12
4.1 Punkty konserwacji	12
4.2 Instrukcje konserwacji	12
4.3 Rozwiązywania problemów	13
4.4 Zakończenie użytkowania	13
5 Dane techniczne	14

PRZEDMOWA

Gratulacje! Stali się Państwo posiadaczem wózka inwalidzkiego Vermeiren!

Ten wózek inwalidzki został wykonany przez wykwalifikowany i zaangażowany personel. Został on zaprojektowany i wyprodukowany według wysokiej jakości standardów stosowanych przez firmę Vermeiren.

Proszę starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją; pomoże ona Państwu zapoznać się z eksploatacją, możliwościami i ograniczeniami swojego wózka. Jeżeli wciąż mają Państwo pytania po przeczytaniu niniejszej instrukcji, proszę niezwłocznie skontaktować się ze swoim specjalistycznym dystrybutorem. Chętnie on Państwu pomoże.

Ważna informacja

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydłużyć okres eksploatacji swojego produktu proszę o niego dbać oraz regularnie kontrolować i serwisować.

Gwarancja na ten produkt bazuje na normalnej eksploatacji i konserwacji, opisanej w niniejszej instrukcji. Uszkodzenia produktu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub brakiem konserwacji spowoduje wygaśnięcie gwarancji.

Niniejsza instrukcja odzwierciedla najnowszy stan rozwoju produktu. Firma Vermeiren jest uprawniona do wdrażania zmian tego typu produktu bez zobowiązań do dostosowywania lub wymiany podobnych produktów dostarczonych wcześniej.

Ilustracje służą objaśnieniu wskazówek w niniejszej instrukcji. Szczegóły odnośnie przedstawionego produktu mogą różnić się od Państwa produktu.

Dostępne informacje

Na naszej stronie internetowej <http://www.vermeiren.com/> można zawsze znaleźć najnowszą wersję informacji. Proszę regularnie sprawdzać tę stronę internetową pod kątem ewentualnych aktualizacji.

Osoby niewidome lub niedowidzące mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją przez aplikację programową syntezatora mowy.



Instrukcja obsługi

Dla użytkownika i specjalistycznego dystrybutora



Instrukcja instalacji

Dla specjalistycznego dystrybutora



Instrukcja serwisowa dla wózków inwalidzkich
dystrybutora

Dla specjalistycznego



Deklaracja zgodności WE

1 PAŃSTWA PRODUKT

Wózek inwalidzki Trigo T jest aktywnym, składanym wózkiem inwalidzkim, z dwoma wyjmowanymi podnóżkami oraz z szerokim zakresem opcji regulacji. Jest on łatwy w obsłudze

przez użytkownika i może być użytkowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Trigo T jest dostępny z opcjami przedstawionymi na naszej stronie internetowej, patrz też §5.

1. OPARCIE
2. PŁYTA BOCZNA (z opcjonalnym podłokietnikiem)
3. SIEDZISKO
4. RAMA
5. PŁYTA PODNÓŻKA (2x)
6. PRZEDNIE KOŁO
7. TYLNE KOŁO
8. UCHWYT DO POPYCHANIA (opcjonalny)
9. PODNÓŻEK
10. HAMULEC
11. TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA



1.1 Akcesoria

Dla Trigo dostępne są następujące akcesoria:

- Uchwyt na kulę
- Koło zapobiegające przewróceniu
- Kółka podróżne
- Poprzeczka stabilizująca oparcie
- Pelota – podpora boczna lewa/prawa
- Koła terenowe 24"
- Pokrywa żelowa na obręcz napędową
- Osłona szprych

2 PRZED UŻYCIEM

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do wózka Trigo T, we wszystkich jego konfiguracjach.

2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Ten wózek inwalidzki jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Ten wózek inwalidzki został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do transportu/przemieszczania jednej (1) osoby o ciężarze maksymalnym podanym w specyfikacji technicznej w §5. Nie jest on przeznaczony do transportowania towarów lub przedmiotów, ani do użytku wykraczającego poza wcześniejszy opis.
- Ten wózek inwalidzki może być obsługiwany przez użytkownika siedzącego na wózku inwalidzkim. Po zamontowaniu uchwytów do popychania może być również obsługiwany przez pomocnika.
- Ten wózek inwalidzki NIE MOŻE być obsługiwany przez osobę cierpiącą na zaburzenia psychiczne lub umysłowe, które mogą narazić tę osobę lub inne osoby na zagrożenie podczas jazdy wózkiem. Z tego powodu należy najpierw skonsultować się z lekarzem i upewnić się, że specjalistyczny dystrybutor został poinformowany odnośnie jego porady.
- Używać tylko akcesoriów i części zamiennych zatwierdzonych przez Vermeiren.
- Proszę zapoznać się z wszystkimi szczegółami technicznymi i ograniczeniami odnośnie swojego wózka inwalidzkiego w §5.

2.2 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Ryzyko obrażeń i / lub uszkodzeń

Dokładnie przeczytać i przestrzegać wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji.

Podczas użytkowania należy pamiętać o ostrzeżeniach ogólnych:

- Nie korzystać z wózka inwalidzkiego będąc pod wpływem alkoholu, leków lub innych substancji mogących wpływać na zgodności do jazdy.
- Należy pamiętać, że niektóre części wózka mogą się mocno rozgrzewać lub ochładzać pod wpływem temperatury zewnętrznej, promieniowania słonecznego lub urządzeń grzewczych. Zachować ostrożność podczas dotykania. Nosić odzież ochronną podczas chłodnej pogody. Będąc na zewnątrz można założyć rękawice do jazdy, poprawiając chwytność obręczy napędowej.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji wózka inwalidzkiego.

Symbole przedstawione w poniższej liście mogą dotyczyć Państwa wózka. Symbole można znaleźć w odpowiednich normach ISO (ISO 7000, ISO 7001 oraz IEC 417).



Maksymalny ciężar użytkownika w kg



Stosowanie w pomieszczeniach/na zewnątrz



Maksymalne bezpieczne nachylenie w ° (stopniach)



Nie przeznaczony do użytku jako siedzenie w pojeździe silnikowym



Oznaczenie typu



Ryzyko uwięzienia

2.3 Transport



Ryzyko odniesienia obrażeń



NIE używać wózka inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe, patrz kolejny symbol.

1. Jaku użytkownik, podjechać do siedzenia pojazdu, patrz §3.8.
2. Złożyć wózek inwalidzki do najbardziej kompaktowej wielkości zgodnie z instrukcją w § 2.4.
3. Umieścić wózek inwalidzki i jego koła w przedziale bagażowym lub za siedzeniem pasażera. Jeżeli bagaż i przedział pasażera NIE są oddzielone lub zamknięte, przymocować bezpiecznie ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. Można skorzystać z dostępnego pasa bezpieczeństwa w pojeździe. Nigdy nie używać tego samego pasa dla pasażera i dla wózka.

2.4 Składanie - rozkładanie



Ryzyko obrażeń i / lub uszkodzeń

- Upewnić się, że palce nie zostały uwięzione w punkcie osi przegubu uchwytów i krzyża ramy.
- Należy zawsze zwracać uwagę na zakres obrotu płyty podnóżka, aby nie spowodować obrażeń ciała osób w pobliżu czy uszkodzenia przedmiotów.

Składanie wózka inwalidzkiego:

4. Pociągnąć poduszkę siedziska i wyjąć ją.
5. Wyjmowanie podnóżków, patrz §0.
6. Chwycić przód i tył siedziska (15) na środku i pociągnąć, aby zamknąć.
7. Złożyć ze sobą rury ramy (5).
8. W razie konieczności wyjąć tylne koła, patrz §2.5.

Rozkładanie wózka inwalidzkiego:

1. Pociągnąć rury ramy siedziska (5) na zewnątrz i popchnąć ramę siedziska w dół z lewej i prawej strony do momentu wypłaszczenia siedziska i zablokowania ramy na miejscu.
2. Jeżeli zostały zdjęte, zamontować tylne koła, patrz §2.5.
3. Zamontować poduszkę siedziska (4) na paskach z rzepami siedziska. Upewnić się, że paski na poduszcze siedziska leżą poprzecznie na paskach siedziska.
4. Montaż podnóżków, patrz §0.



2.5 (De)Montaż tylnych kół

Sposób demontażu tylnych kół

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (43) wysuwając oś koła z otworu ramy.
2. Powtórzyć czynność dla drugiego koła i umieścić wózek inwalidzki delikatnie na tylnych rurach ramy.

Sposób instalacji tylnych kół

1. Wziąć jedno z tylnych kół i podnieść wózek inwalidzki z jednej strony.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (43) wsuwając koło na oś.
3. Zwolnić przycisk, aby zablokować koło. Upewnić się, że zatrzasnęło się z kliknięciem.
4. Powtórzyć tę czynność dla drugiego koła.
5. Upewnić się, że oba są mocno dokręcone.



2.6 Przechowywanie

- i** Wózek inwalidzki powinien być przechowywany w suchym środowisku, aby zapobiec tworzeniu się na nim pleśni i uszkodzeniu tapicerki, patrz też rozdział 5.

3 KORZYSTANIE Z WÓZKA INWALIDZKIEGO

UWAGA

Ryzyko obrażeń i / lub uszkodzeń

Upewnić się, że ręce, odzież, pasy, sprzączki lub biżuteria nie zablokują się w kołach lub innych ruchomych częściach podczas użytkowania lub regulacji.

PL

3.1 Hamulce postojowe

UWAGA

Ryzyko obrażeń i / lub uszkodzeń

- Nigdy nie zwalniać obu hamulców równocześnie.
- Hamulce mogą być regulowane przez wyspecjalizowanego dystrybutora.
- Nie używać hamulców postojowych do zwalniania wózka podczas ruchów.

Hamulce dźwigniowe

i Hamulec dźwigniowy może być montowany na dwa sposoby (w dwóch kierunkach), co do których decyzja jest podejmowana podczas zamawiania wózka. W zależności od wybranego kierunku, hamulec należy popchnąć lub pociągnąć celem uruchomienia.

Zwalnianie hamulców (A):

1. Chwycić jedną obręcz napędową jedną ręką.
2. Popchnąć lub pociągnąć dźwignię (10) DRUGIEGO koła.
3. Powtórzyć dla drugiego koła i hamulca postojowego.



Zaciąganie hamulców (B):

1. Chwycić jedną obręcz napędową jedną ręką.
2. Popchnąć lub pociągnąć drążek (10) DRUGIEGO koła do momentu wycucia wyraźnej blokady.
3. Powtórzyć dla drugiego koła i hamulca postojowego.



Hamulce sportowe

Hamulce sportowe są umieszczone pod siedzeniem.

Zwalnianie hamulców:

1. Chwycić jedną obręcz napędową jedną ręką.
2. Popchnąć dźwignię DRUGIEGO koła DO TYŁU.
3. Powtórzyć dla drugiego koła i hamulca postojowego.

Zaciąganie hamulców:

1. Chwycić jedną obręcz napędową jedną ręką.
2. Popchnąć drążek DRUGIEGO koła do przodu momentu wycucia wyraźnej blokady.
3. Powtórzyć dla drugiego koła i hamulca postojowego.



3.2 Dźwignie popychania (bezstopniowa regulacja)

W zależności od wybranej konfiguracji wózek inwalidzki może zostać dostarczony bez dźwigni popychania lub może zostać wyposażony w normalne dźwignia lub składane dźwignie.

3.3 Podłokietniki – Płyty boczne

W zależności od wybranych konfiguracji, wózek inwalidzki może zostać wyposażony w wiele różnych podłokietników:

- Stałe płyty boczne bez podłokietników
- Stałe płyty boczne z podłokietnikami
- Składane rurowe podłokietniki
- Zdejmowane płyty boczne

3.4 Składane oparcie

Składanie oparcia na siedzisko

1. Ostrożnie pociągnąć tylny pasek. (20). Trzpienie bezpieczeństwa mechanizmu składania (21) są zwolnione.
2. Popchnąć oparcie w dół na siedzisko.

Pociąganie oparcia w górę

1. Pociągnąć oparcie w górę do momentu kliknięcia w pozycji.
2. Upewnić się, że oba trzpienie zabezpieczające zablokowały się w otworach mechanizmu składania (21).
3. Sprawdzić poruszając oparciem.



3.5 Zabezpieczenie przed przewróceniem (opcjonalne)

Urządzenie zabezpieczające przed przewróceniem zapobiega przewróceniu wózka inwalidzkiego to tyłu. Gdy urządzenie nie jest potrzebne, można je odchylić w bok pociągając pionowy profil (16) w dół i obracając go w kierunku przodu wózka, aż zaskoczy na swoje miejsce.

Aby wyregulować wysokość urządzenia zapobiegającego wywróceniu zgodnie z położeniem i rozmiarem tylnych kół:

1. Poluzuj pokrętło gwiazdziste (17), aż rura wewnętrzna zabezpieczenia przed przewróceniem będzie mogła zostać przesunięta w podporze.
2. Przesuwaj zabezpieczenie przed przewróceniem w górę / w dół, aż do żądanej pozycji.
3. Dokręć pokrętło gwiazdziste (17).

Zabezpieczenie przed przewróceniem powinno znajdować się około 15-20 mm nad ziemią.



3.6 Zdejmowanie/montaż podnóżków

Zdejmowanie podnóżków

1. Pociągnąć dźwignię (22) na podnóżku.
2. Odchylić podnóżek na bok wózka.
3. Wyjąć podnóżek z podpory podnóżka (23).
4. Powtórzyć dla drugiego podnóżka.

Montaż podnóżków

1. Umieścić podnóżek w podporze podnóżka (23), trzymając podnóżek z boku wózka inwalidzkiego.
2. Obrócić podnóżek do przodu do momentu jego zaczepienia na miejscu.
3. Powtórzyć dla drugiego podnóżka.



3.7 Regulacja komfortu

 UWAGA

Ryzyko obrażeń i / lub uszkodzeń

- Opiekun lub pomocnik mogą przeprowadzać następujące regulacje komfortu. Wszelkie inne regulacje są wykonywane przez wykwalifikowanego dystrybutora (patrz instrukcja instalacji).
- Należy zawsze zwracać uwagę na zakres obrotu płyty podnóżka, aby nie spowodować obrażeń ciała osób w pobliżu czy uszkodzenia przedmiotów.
- Upewnić się, że palce, odzież, sprzączki nie zablokują się podczas użytkowania lub regulacji.

PL

3.7.1 Szerokość oparcia i podparcie

Oparcie wózka inwalidzkiego ma układ zawieszenia z tuzem regulowanymi paskami do regulacji szerokości i elastyczności oparcia.

1. Pociągnąć poduszkę oparcia z pasków z rzepami oparcia.


1. Poluzować paski na rzepy.

2. Pociągnąć odpowiedni pasek w żądane położenie. Naprężenie poszczególnych pasków można zmieniać, a żądane podparcie pleców ustawić.

3. Umieścić poduszkę oparcia ponownie na oparciu, rozpoczynając od przodu i kończąc z tyłu.

4. Zabezpieczyć połączenia pasków z rzepami dociskając poduszkę do oparcia ręką.

5. Upewnić się, że wszystkie paski zostały zabezpieczone paskami z rzepami.

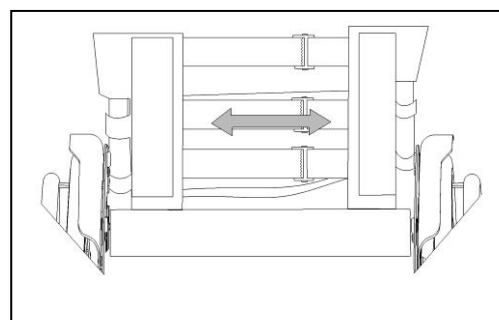

3.7.2 Wysokość oparcia (regulacja krokowa)

1. Wyjąć tylną poduszkę.

2. Nacisnąć przycisk sprężyny umieszczony z tyłu rury tylnej ramy.

3. Przesunąć oparcie w górę/w dół na żądaną wysokość.

4. Upewnić się, że przycisk sprężyny ponownie zatrzasnął się w odpowiednim otworze.

5. Powtórzyć to samo dla drugiej strony. Upewnić się, że oba strony są ustawione na tę samą wysokość i że zostały mocno przykręcone.

3.7.3 Wysokość dźwigni popychania (bezstopniowa regulacja)

Dźwignia mocująca

1. Obrócić dźwignię popychania (40), aby ją zwolnić.

2. Przesunąć dźwignię popychania w górę/w dół na żądaną wysokość.

3. Zabezpieczyć uchwyt dokręcając dźwignię (40).

4. Powtórzyć dla drugiej dźwigni popychania. Upewnić się, że oba uchwyty są ustawione na tę samą wysokość i że zostały mocno przykręcone.



Pokrętło ustalające

1. Obrócić pokrętło dźwigni popychania (30) o kilka obrotów w lewo.
2. Przesunąć oparcie w górę/w dół na żadaną wysokość pociągając uchwyty.
3. Zabezpieczyć oparcie dokręcając pokrętło; obrócić w prawo.
4. Powtórzyć to samo dla drugiej strony. Upewnić się, że oba strony są ustawione na tę samą wysokość i że zostały mocno przykręcone.



3.8 Przechodzenie na / schodzenie z wózka inwalidzkiego

 UWAGA

Ryzyko obrażeń i uszkodzeń

- Jeżeli nie da się wykonać transferu w bezpieczny sposób, należy poprosić kogoś o pomoc.
- Nie stawać na płycie podnóżka podczas transferu na lub z wózka inwalidzkiego.

Transfer

1. Umieścić wózek inwalidzki jak najbliżej siebie, siedząc na krześle, tapczanie, fotelu lub łóżku.
1. Zaciągnąć oba hamulce postojowe celem zablokowania ruchu, patrz §3.1.
2. Obrócić podnóżki w bok lub złożyć płyty podnóżka w górę, aby zapobiec stawaniu na nich.
3. Przenieść się do / z wózka inwalidzkiego używając siły ramion lub korzystając z pomocy pomocnika (pomocników) lub urządzenia do podnoszenia.

Siadanie na wózku inwalidzkim

1. Usiąść na siedzisku opierając się częścią lędźwiową o oparcie.
2. Obrócić podnóżki do przodu do momentu zaczeplenia ze słyszalnym kliknięciem lub złożyć płyty podnóżka w dół i położyć na nie stopy.

3.9 Jazda

 UWAGA

Ryzyko obrażeń i uszkodzeń

- Przed każdym użyciem należy się upewnić, że:
 - hamulce postojowe działają prawidłowo,
 - opony są w dobrym stanie, patrz §4.
- Uważać, aby nie włożyć palców do szprych koła.
- Nie obsługiwać obręczy napędowej mokrymi rękami.
- Uważać zablokowanie rąk na obręczy napędowej przejeżdżając przez wąskie przejścia.
- NIE przejeżdżać po stromych nachyleniach, przeszkodach, stopniach lub krawężnikach większych, niż określono w §5.
- Zatrzymując się na (małym) nachyleniu należy użyć hamulców.
- Upewnić się, że wszystkie cztery koła dotykają podłoża podczas jazdy w górę i w dół po nachyleniu.
- Nachylenia pokonywać jak najwolniej.
- Jeżdżąc po drogach publicznych należy zawsze korzystać z chodnika.
- Zwracać uwagę, czy na drodze nie ma dziur ani szczelin, w których koła mogą zostać uwięzione.
- Unikać kamieni i innych obiektów, które mogą zablokować koła.
- Upewnić się, że płyty podnóżka nie dotykają podłoża podczas pokonywania przeszkody.
- Nie korzystać z wózka inwalidzkiego w windzie.

- Jeżeli to możliwe, zapinać pas bezpieczeństwa.
- Należy zawsze zwracać uwagę na zakres obrotu płyty podnóżka, aby nie spowodować obrażeń ciała osób w pobliżu czy uszkodzenia przedmiotów.
- W przypadku braku doświadczenia w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim należy poprosić o pomoc drugiej osoby. Odsunąć ręce od kół, a stopy położyć na płycie podnóżka.
- Stopnie należy pokonywać zawsze przy pomocy dwóch pomocników.
- Nie próbować korzystać ze schodów, które nie są przystosowane do wózków inwalidzkich.



3.9.1 Jazda wózkiem inwalidzkim:

1. Zwolnić hamulce.
2. Chwycić obie obręcze napędowe w najwyższym punkcie.
3. Pochylić się do przodu i popchnąć obręcze napędowe do przodu do momentu wyprostowania rąk.
4. Przenieść ręce ponownie na górną część obręczy napędowych i powtórzyć ruch.

4 KONSERWACJA

4.1 Punkty konserwacji

**UWAGA**

Ryzyko obrażeń i uszkodzeń

Naprawy i wymiana części mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolone osoby i wolno korzystać z oryginalnych części zamiennych Vermeiren.

i Częstotliwość serwisowania zależy od częstotliwości i intensywności użytkowania. Skontaktować się z dystrybutorem celem uzgodnienia harmonogramu inspekcji / konserwacji / naprawy.

Instrukcje dotyczące konserwacji znajdziesz na stronie internetowej firmy Vermeiren: www.vermeiren.pl.

Przed każdym użyciem

Przejrzeć następujące punkty:

- Wszystkie części: Obecne, nie uszkodzone i nie zużyte.
- Wszystkie części: Wyczyścić, patrz § 4.2.2.
- Koła, oparcie, siedzisko, podparcie łydki, podłokietnik, płyty podnóżka: Dobrze zabezpieczone.
- Stan kół/opon, patrz § 4.2.1;
- Stan części ramy: Brak deformacji, niestabilność, słabe lub luźne połączenia
- Siedzisko, oparcie, podpórki ramion, podpórki łydek i oparcia (jeżeli dotyczy): Brak nadmiernego zużycia (punkty wgnieceń, uszkodzenia lub rozerwania).
- Hamulce: Nieuszkodzone i sprawne.

Skontaktować się ze specjalistycznym dystrybutorem pod kątem ewentualnych napraw lub wymiany.

Raz w roku lub częściej

Co najmniej raz w roku lub częściej zlecać kontrolę i serwisowanie wózka inwalidzkiego wykwalifikowanemu dystrybutorowi. Minimalna częstotliwość konserwacji jest uzależniona od użytkowania i należy ją uzgodnić z wykwalifikowanym dystrybutorem.

4.2 Instrukcje konserwacji

4.2.1 Koła i opony

i Odpowiednie działanie hamulców jest uzależnione od stanu opon i może się zmieniać ze względu na zużycie i zanieczyszczenie (woda, olej, błoto, ...)

Usuwać z kół druty, włosy, piasek i włókna.

Sprawdzić profil opon. Jeżeli głębokość bieżnika jest mniejsza, niż 1 mm, opony należy wymienić. W tej sprawie należy skontaktować się ze specjalistycznym dystrybutorem.

Napompować każdą pneumatyczną oponę odpowiednim ciśnieniem (patrz informacja odnośnie ciśnienia na oponach).

4.2.2 Czyszczenie

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia przez wilgoć.

- Do czyszczenia wózka inwalidzkiego nie wolno nigdy stosować węża ani myjki ciśnieniowej.

Wytrzeć wszystkie sztywne części wózka wilgotną szmatką (nie wykreconą).

W razie konieczności użyć łagodnego mydła, odpowiedniego do lakierów i materiałów syntetycznych.

Tapicerkę można czyścić letnią wodą i łagodnym mydłem. Do czyszczenia nie używać szorstkich środków czyszczących.

4.2.3 Dezynfekcja

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Dezynfekcja może być przeprowadzana tylko przez przeszkolone osoby. Skonsultować się ze specjalistycznym dystrybutorem.

4.3 Rozwiązywania problemów

Nawet w przypadku prawidłowego korzystania z wózka może wystąpić problem techniczny. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym specjalistycznym dystrybutorem.

 OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń i uszkodzenia wózka inwalidzkiego

- NIGDY nie naprawiać wózka inwalidzkiego samodzielnie usiłując rozwiązać problem.

Poniższe symptomy mogą oznaczać poważny problem. Dlatego też w przypadku zauważenia poniższych niezgodności należy zawsze skontaktować się ze specjalistycznym dystrybutorem.

- Dziwne dźwięki;
- Nierównomierne zużycie bieżnika opon;
- Szarpane ruchy;
- Wózek inwalidzki ściąga na jedną stronę;
- Uszkodzone lub pęknięte zespoły koła.


4.4 Zakończenie użytkowania

Po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać wózek utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Najlepszym sposobem jest demontaż wózka inwalidzkiego, aby ułatwić transport części poddawanych utylizacji.

5 DANE TECHNICZNE

Poniższe szczegóły techniczne dotyczą tylko wózka inwalidzkiego przy standardowych ustawieniach i optymalnych warunkach otoczenia. Podczas użytkowania należy wziąć pod uwagę te szczegóły. Wartości nie mają już zastosowania, gdy wózek inwalidzki został zmodyfikowany, uszkodzony lub jest poważnie zużyty.

Tabela 1: Dane techniczne

Marka	VERMEIREN	
Typ	Wózek inwalidzki	
Model	Trigo T	
		
Opis	Dane techniczne	
Maks. ciężar użytkownika	Dla szerokości siedziska do 360 mm z pojedynczym krzyżakiem: 70 kg Dla szerokości siedziska do 380 mm do 460 z 1,5 krzyżaka: 130 kg Dla szerokości siedziska od 480 mm do 500 z podwójną krzyżakiem: 130 kg	
Stabilność statyczna	5°	
Wymiary	Min.	Maks.
Długość całkowita	676 mm	1046 mm
Długość po rozłożeniu (koła zdemontowane)	650 mm	855 mm
Szerokość po rozłożeniu (koła zdemontowane)	386 mm	586 mm
Wysokość po złożeniu (w zależności od średnicy kół)	457 mm	660 mm
Wysokość wózka inwalidzkiego (w zależności od typu tylnego koła, regulacji, dźwigni popychania lub wysokości oparcia)	457 mm	945 mm
Wysokość złożona bez kół	Max. 428 mm	
Szerokość siedziska	300 mm	500 mm
Szerokość ogólna w mm (24" tylne koła, kąt nachylenia 0°):	460 mm	660 mm
Ługość wózka inwalidzkiego (w zależności od głębokości siedziska, typu tylnego koła, typu płyty podnóżka, regulacji)	676 mm	1046 mm
Głębokość płótna – Głębokość siedzenia	320 mm	500 mm

Wysokość oparcia, regulowana Nie składane oparcie Nie składane oparcie Składane oparcie Składane oparcie Składane oparcie	(w stopniach co 25 mm) 250 - 300 300 - 350 350 - 400 400 - 450 450 - 500
Wysokość oparcia, stałe, składane	(w stopniach co 20 mm) 250 - 510 mm
Wysokość siedziska na przedniej krawędzi siedziska, względem przednich kół Przednie koło 3" Przednie koło 4" Przednie koło 5" Przednie koło 6"	(w stopniach co 10 mm) 380 - 470 390 - 490 410 - 500 430 - 510
Wysokość siedziska na tylnej krawędzi siedziska, w zależności od tylnego koła Tylne koło 18" Tylne koło 20" Tylne koło 22" Tylne koło 24" Tylne koło 26"	(w stopniach co 10 mm) 315 - 415 335 - 435 355 - 465 385 - 495 405 - 515
Odległość pomiędzy boczną płytą/błotnikiem i siedziskiem	0 mm
Odległość pomiędzy płytą podnóżka i siedziskiem	240 - 460 mm
Długość podnóżka, regulowana	240 - 460 mm
Regulowany kat płaszczyzny siedziska	20°
Kąt pomiędzy siedziskiem i podnóżkiem	Stały, 70°, 80° lub 90°
Kąt płyty podnóżka i podnóżkiem	20° (w stopniach co 5°)
Ciążar	
Ciążar całkowity	12,3 kg
Ciążar najcięższej części (bez poduszki siedziska i oparcia, kół)	7,2 kg
Ciążary usuwanych części: Koło 24" Poduszka oparcia Poduszka siedziska Podnóżek z płytą podnóżka Dźwignia do popychania (regulowana)	3,1 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,65 kg 0,4 kg
Koła	
Ustawienie domyślne kąta nachylenia tylnych kół, regulowane	0° 2° 4° 6°
Przednie koło	3" - 4" - 5" - 6"
Tylne koła	18" - 20" - 22" - 24" - 26"



Średnica obręczy napędowej	400 mm – 440 mm – 500 mm – 535 mm – 600 mm
Ciśnienie w oponie, tylne koła	2,5 - 10 bar
Środowisko	
Próby wytrzymałości wg	ISO 7176-8
Zapalność obicia wg	ISO 7176-16
Temperatura przechowywania i użytkowania	+5 °C ~ +41 °C
Wilgotność podczas przechowywania i użytkowania	30% ~ 70%
Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych. Tolerancja wymiarów ± 15 mm /1,5 kg / 1,5°.	

PL



Service registration form

This product (name):

was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:



Vermeiren GROUP NV
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

WWW: www.vermeiren.com

Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego produktu.

Wersja: B, 2019-11

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie może być również przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocą systemów elektronicznych.